


beurer

MG 18



LT Mini masažuoklis
Naudojimo instrukcija



CE

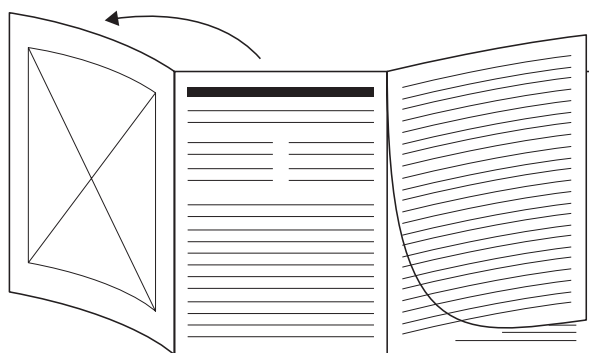


LT Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukcijas, atverskite 3 puslapį.



A

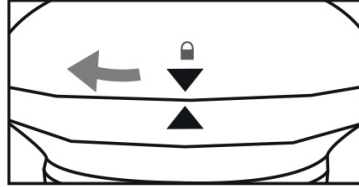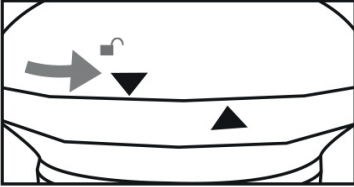

B

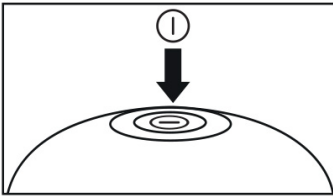



Atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui, pasirūpinkite, kad jos būtų prieinamos kitiems vartotojams ir atkreipkite dėmesį į jose pateiktą informaciją.

Įspėjimas

- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir žmonės, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus, neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo tinkamai instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir suvokia apie kylančius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai gali valyti prietaisą tik prižiūrimi suaugusiųjų.
- Naudojimo metu prietaiso paviršius įkaista. Asmenys, nejautrūs karščiui, turėtų būti ypač atsargūs.
- Draudžiama ardyti ir savarankiškai remontuoti prietaisą, nes po to, nebus galima užtikrinti nepriekaištingo jo veikimo. Nesilaikant šio reikalavimo, garantija netenka galios.

Turinys

1. Pakuotės turinys.....	5	7. Naudojimas.....	8
2. Simbolių paaiškinimas.....	6	8. Valymas ir priežiūra	9
3. Naudojimo paskirtis.....	6	9. Kas, jei kyla problemų?	9
4. Įspėjimai ir saugos nuorodos.....	7	10. Utilizacija	9
5. Prietaiso apžvalga.....	8	11. Techninės specifikacijos	9
6. Pasiruošimas darbui	8	12. Garantija / aptarnavimas	9

1. Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar nepažeista pristatymo kartoninės pakuotės išorė, ir įsitikinkite, kad visi komponentai yra komplektacijoje. Prieš naudodami įsitikinkite ar nėra matomų prietaiso ar jo priedų pažeidimų ir nuo jų pašalintos visos pakavimo medžiagos. Jei kyla abejonų, nenaudokite prietaiso ir susisiekite su pardavėju arba nurodytu klientų aptarnavimo centru.

- 1 x Mini masažuoklis
- 3 x Baterijos AAA tipo
- 1 x Naudojimo instrukcija

2. Simbolių paaiškinimas

Naudojimo instrukcijoje ar tipinėje lentelėje naudojami šie simboliai:

	ĮSPĖJIMAS Įspėja apie gresiantį pavojų gyvybei arba sveikatai.
	ATSARGIAI Saugos informacija apie galimą prietaiso/priedų sugadinimą.
	PASTABA Svarbi informacija
	Nuolatinė srovė
	Perskaitykite naudojimo instrukciją
	Gamintojas
	Ženklintas pakavimo medžiagai identifikuoti. A = medžiagos santrumpa, B = medžiagos numeris: 1–7 = plastikas, 20–22 = popierius ir kartonas
	Atskirkite pakuotės elementus ir utilizuokite juos laikydamiesi vietinių taisyklių.
	Prietaisą utilizuokite vadovaudamiesi EC direktyvos reikalavimais dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	CE ženklas užtikrina, kad šis gaminys atitinka ES ir nacionalines direktyvas.
	Produktas atitinka EAES normatyvinių ir techninių dokumentų reikalavimus.
	Atitiktis įvertinimo žymėjimas Jungtinėje Karalystėje.
	Atskirkite gaminį ir pakuotės elementus ir utilizuokite juos laikydamiesi vietinių taisyklių.
	Importuotojo simbolis

3. Naudojimo paskirtis

Šis prietaisas skirtas tam tikrų žmogaus kūno vietų masažui. Jis negali pakeisti medicininio gydymo. Nenaudokite prietaiso kūno masažui, jei Jums tinka viena ar kelios žemiau pateiktos indikacijos. Pasikonsultuokite su gydytoju, jei nesate tikri, ar tinkamai pasirinkote kūno masažo prietaisą.

ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite masažuoklio:
 - ant gyvūnų,
 - jeigu turite tarpšlankstelinio disko išvaržą ar su stuburo ligomis susijusių pakitimų,

- masažui širdies plote, jei turite širdies stimuliatorių – ir pasitarkite su gydytoju dėl kitų kūno dalių masažo,
- ant patinusios, nudegusios, sudirgusios ar pažeistos odos, bet kurioje kūno vietoje,
- nėštumo metu,
- ant veido (akių), gerklų ar kitų ypač jautrių kūno vietų,
- miego metu,
- pavartojus vaistų ar alkoholio (sutrikęs jautrumas!).
- Prieš naudodami masažuoklį, turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju:
- jeigu sergate sunkia liga arba neseniai Jums buvo atlikta operacija;
- jeigu esate peršalęs ir karščiujate, sergate venų varikoze, tromboze, flebitu, gelta, diabetu, nervų sistemos ligomis (pavyzdžiui, išialgija) ar Jums pasireiškia ūmaus uždegimo simptomai.

Prietaisą leidžiama naudoti tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytais tikslais. Gamintojas neat-sako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar neatsargaus elgesio su juo.

4. Įspėjimai ir saugos nuorodos

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas. Nesilaikant toliau pateiktos informacijos, galite susižaloti ar patirti materialinę žalą. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją kitiems vartotojams prieinamoje vietoje. Perduodami prietaisą kitam vartotojui, kartu perduokite ir šią naudojimo instrukciją.



ĮSPĖJIMAS

- Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis. Galimas uždusimo pavojus.

Baterijų naudojimas

- Jei ant odos ar į akis pateko baterijų skysčio, nuplaukite paveiktas vietas dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos.
- **Užspringimo pavojus!** Maži vaikai gali baterijas nuryti ir užspringti. Baterijas laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykitės poliškumo: pliusas (+) ir minusas (–).
- Jei iš baterijų išteklėjo skystis, baterijų skyrių išvalykite mūvėdami apsaugines pirštines.
- Saugokite baterijas nuo perteklinio karščio.
- **Sprogimo pavojus!** Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Nebandykite įkrauti baterijų, neužtrumpinkite jų.
- Jei prietaisas ilgą laiką bus nenaudojamas, išimkite iš jo baterijas.
- Naudokite tik vieno tipo arba lygiavertės baterijas.
- Visada keiskite visas baterijas iš karto.
- Nenaudokite akumuliatorių!
- Neardykite ir nedeformuokite baterijų.

Remontas



ĮSPĖJIMAS

- Elektros prietaisus gali remontuoti tik kvalifikuoti asmenys. Netinkamas remontas gali sukelti didelį pavojų naudotojui. Jei jūsų prietaisą reikia remontuoti, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi ar prietaiso pardavėju.

Gaisro pavojus

ĮSPĖJIMAS

Jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį arba nesilaikant šios naudojimo instrukcijos nurodymų, gali kilti gaisro pavojus.

- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, ypač jei šalia yra vaikų.
- Neuždenkite naudojamo prietaiso pvz., antklode ar po pagalvėmis.

Priežiūra

SVARBU

- Po kiekvieno naudojimo ir prieš kiekvieną valymą prietaisą būtina išjungti.
- Saugokite, kad į prietaisą neįstrigtų plaukai.
- Venkite kontakto su aštriais ar smaliais daiktais.
- Nelaikykite prietaiso arti šilumos šaltinių, pavyzdžiui, orkaitės, šildytuvų ar tiesioginių saulės spindulių.

5. Prietaiso apžvalga

Paveikslėliai pateikti 3 puslapyje.

 Mygtukas ĮJUNG./IŠJUNG.

 Šildymo funkcija

6. Pasiruošimas darbui

- Išimkite iš pakuotės.
- Patikrinkite, ar prietaisas nėra nepažeistas.

Baterijų įdėjimas

Atsukite baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite 3 AAA tipo baterijas (žr. į baterijų poliškumą). Vėl uždėkite baterijų skyriaus dangtelį. Įsitikinkite, kad dangtelis uždėtas teisingai.

7. Naudojimas

Įjunkite mini masažuoklį paspausdami ĮJUNG./IŠJUNG. mygtuką . Laikydami prietaisą viena arba abiem rankomis, prispauskite jį prie kūno dalies, kurią norite masažuoti. Galite stovėti, sėdėti arba gulėti ir masažuoti save arba kitą žmogų. Masažo intensyvumas priklauso nuo prietaiso spaudimo stiprumo į masažuojamą kūno vietą. Masažuokite tam tikrą kūno vietą ne ilgiau kaip 3 minutes, po to pereikite prie kitų vietų.

Dar kartą paspaudus ĮJUNG./IŠJUNG. mygtuką, mini masažuoklis išsijungs.



Nenaudokite masažuoklio prieš pat einant miegoti. Masažas taip pat gali turėti stimuliuojantį poveikį ir sutrikdyti miegą.

ĮSPĖJIMAS

Masažas visada turi teikti malonumą ir atpalaiduoti. Jei masažas yra skausmingas ar nepatogiai jaučiatės, nutraukite masažą arba pakeiskite masažuoklio padėtį.

8. Valymas ir priežiūra

Valymas

Leiskite prietaisui atvėsti, tada nuvalykite jį šiek tiek drėgna šluoste. Galite naudoti švelnų valiklį.



ĮSPĖJIMAS

- Prietaisą valykite tik nurodytu būdu. Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų skysčio.
- Nenaudokite prietaiso, kol jis visiškai neišdžiūvo.

Laikymas

Masažuoklį laikykite vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Rekomenduojame laikyti originalioje pakuotėje.

9. Kas, jei kyla problemų?

Problema	Priežastis	Sprendimas
Masažuoklis neveikia	Baterijos neįdėtos/baterijos išsikrovusios.	Laikykites skyriuje „Baterijų įdėjimas“ pateiktų nurodymų.
	Prietaisas neįjungtas	Ijunkite prietaisą.

10. Utilizacija




SVARBU

Nebenaudojamą įrenginį neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Įrenginį perduokite į buitinės technikos surinkimo arba perdirbimo punktą. Nebenaudojamą įrenginį išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva). Jei turite klausimų, kreipkitės į vietos komunalinę tarnybą, atsakingą už atliekų tvarkymą.



Informacijos apie galimus utilizavimo būdus teiraukitės vietinės valdžios pareigūnų arba įrenginį pardavusio prekybos centro atstovų.

11. Techninės specifikacijos

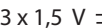Maitinimas:	3 x 1,5 V  baterijos AAA tipo LR03
Matmenys:	30.5 x 7.5 x 6.7 cm
Svoris:	Apie 350 g

12. Garantija / aptarnavimas

Daugiau informacijos apie garantiją ir garantines sąlygas rasite pateiktame garantijos lapelyje.



"Beurer UK" Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way, WA32SH Golbornas, Jungtinė Karalystė



"Beurer GmbH" • Söflinger g. 218 • 89077 Ulmas, Vokietija • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitstratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



102.55_MG18_2023-08-21_01_IM1_BEU