

beurer


MG 89 Masāžas pistole CompactPower




LV Dziļo audu masāžas ierīce

Lietošanas norādījumi 4



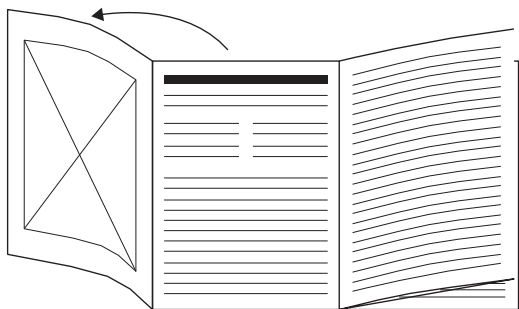

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiet 3. lappusi.

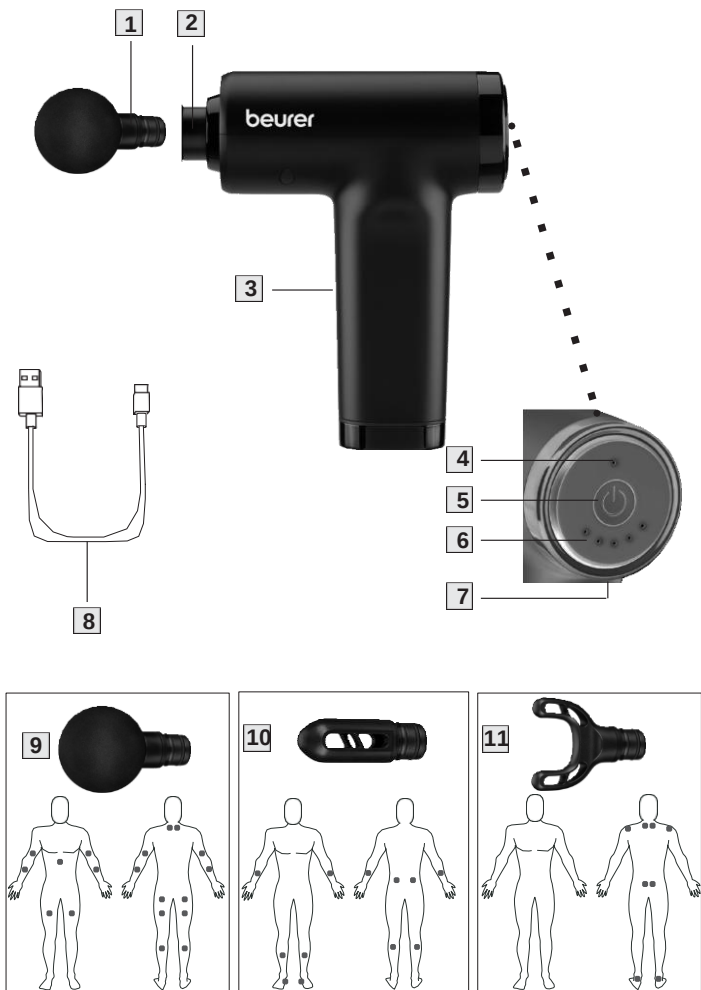



Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai izmantošanai. Padariet to pieejamu citiem lietotājiem un ņemiet vērā tajā ietverto informāciju.

1.	Bīdīnājumi un drošības norādījumi.....	6
2.	Komplektācija.....	7
3.	Paredzētais pielietojums.....	7
4.	Apzīmējumi un simboli.....	8
5.	Ierīces apraksts.....	9
5.1	Dziļo audu masāžas aparāts.....	9
5.2	Piederumi.....	9
6.	Lietojums.....	9
6.1	Sākotnējā lietošana/akumulatora uzlāde.....	9
6.2	Piederuma izvēle/mainīšana.....	10
6.3	Ierīces ieslēgšana/intensitātes līmeņa izvēle.....	10
7.	Tīrīšana un apkope.....	10
8.	Ko darīt, ja radušās problēmas?.....	11
9.	Utilizācija.....	11
10.	Tehniskās specifikācijas.....	12
11.	Garantija/ apkope.....	12

⚠️ BRĪDINĀJUMS:

- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi tiek uzraudzīti.
- Ja ierīces strāvas kabelis ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nevar noņemt, ierīci nepieciešams utilizēt.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces atverē vai kustīgajās daļās. Nodrošiniet, lai kustīgās daļas vienmēr varētu brīvi kustēties.
- Neiespiediet nevienu ķermeņa daļu, jo īpaši pirkstus, starp kustīgajiem masāžas elementiem vai to turētāju.

1. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

▲BRĪDINĀJUMS:

Neizmantojiet ierīci, ja masējamā zonā jums ir medicīniska anomālija vai trauma (piemēram, noslīdējis disks, vaļējas brūces).

- Neizmantojiet ierīci, ja lietojat elektrokardiosimulatoru.
- Neizmantojiet ierīci sirds apvidus masāžai.
- Neizmantojiet ierīci uz pietūkušas, apdegušas, iekaisušas vai ievainotas ādas un ķermeņa daļām.
- Neizmantojiet ierīci uz iegriezumiem, kapilāriem, varikozām vēnām, pinnēm, kuperozas ādas, ja jums ir herpes vai citas ādas slimības.
- Neizmantojiet ierīci grūtniecības laikā.
- Neizmantojiet ierīci uz galvas vai sejas (piemēram, acu zonā), balsenes, kaunuma zonā vai citās īpaši jutīgās ķermeņa daļās.
- Neizmantojiet ierīci uz mugurkaula vai tieši uz kaula.
- Neizmantojiet ierīci miega laikā.
- Neizmantojiet ierīci dzīvniekiem.
- Neizmantojiet ierīci pēc medikamentu vai alkohola lietošanas (traucētas kognitīvās spējas!).
- Neizmantojiet ierīci transportlīdzeklī.



Pirms masāžas ierīces lietošanas jākonsultējas ar ārstu, ja:

- ja jums ir smaga slimība.
- ja jums ir tromboze.
- ja jums ir diabēts,
- ja jums ir sāpes, kuru cēlonis nav zināms.

▲BRĪDINĀJUMS

- Pastāv nosmakšanas briesmas! Nelaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.
- Pastāv nosmakšanas briesmas! Glabājiet ierīces piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Pārliecinieties, ka ierīce nenonāk saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Nekad neņemiet rokās ierīci, kas iekritusi ūdenī.
- Ierīces lietošanas laikā bērni vienmēr ir jāuzrauga.
- Nepareizi lietojot ierīci vai ignorējot šos lietošanas norādījumus, pastāv ugunsgrēka risks.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā darbojas, jo īpaši, ja tuvumā ir bērni.
- Nekad nelietojiet ierīci zem pārklāja, piemēram, segas vai spilvena.
- Nekad nelietojiet ierīci benzīna vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Darbiniet ierīci tikai sausās iekštelpās.
- Nekad nelietojiet ierīci vannā vai saunā.

▲UZMANĪBU

- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei un tās piederumiem nav redzamu bojājumu. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirdzniecības vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.
- Nekad neatveriet korpusu.
- Ierīci turiet tālu no spīdīgiem vai asiņiem priekšmetiem.
- Ja ierīce ir nomesta vai citādi bojāta, to vairs nedrīkst lietot.
- Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes un pirms tīrīšanas.

- Nekad nelietojiet ierīci ilgāk par 15 minūtēm (pārkaršanas risks). Laužiet ierīci atdzist vismaz 15 minūtes, pirms lietojat to atkārtoti.
- Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem.
- Aizsargājiet ierīci un piederumus no triecieniem, putekļiem, ķīmiskām vielām, krāsām, temperatūras izmaiņām, elektromagnētiskajiem laukiem un tuvu mā esošiem karstuma avotiem (krānsis, sildītāji).

⚠ BRĪDINĀJUMS:

Remonts

- Nekad nemēģiniet labot ierīci saviem spēkiem!
- Elektrisko ierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti. Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Neatbilstoši veikts remonts var būtiski apdraudēt lietotājus. Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto mazu mīrgo tāju. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Piezīmes par bateriju lietošanu

- Ja šķidrums no baterijas elementa nonāk uz ādas vai acis, nomazgājiet skartās vietas ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- **Aizrīšanās risks!** Mazi bērni var norīt un aizrīties ar baterijām. Tāpēc baterijas glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā!
- Ja baterijai rodas noplūde, uzvelciet aizsargcimdus un atbrīvojieties no ierīces.
- Aizsargājiet baterijas no pārmērīga karstuma iedarbības.
- **Sprādziena risks!** Nemetiet baterijas ugunī!
- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai saspīst.

- Lai baterijas kalpošanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks, vismaz 2 reizes gadā bateriju pilnībā uzlādējiet.
- Pirms uzlādes vienmēr izslēdziet ierīci.
- Pirms lietošanas baterijas ir pareizi jāuzlādē. Vienmēr ir jāievēro ražotāja norādījumi un šajā lietošanas instrukcijā sniegtās specifikācijas par pareizu uzlādi.

2. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārliecinieties, vai tajā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka dzīlo audu masāžas aparātam un tā piederumiem nav redzamu bojājumu.

- 1 Dzīlo audu masāžas aparāts
- 3 Piederumi
- 1 USB-C kabelis
- 1 lietošanas instrukcija

3. PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS

⚠ BRĪDINĀJUMS:

Lietojiet dzīlo audu masāžas aparātu tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem. Masāžas aparāts un tā piederumi nav medicīnas ierīces, bet gan masāžas procedūras ierīces. Dzīlo audu masāžas aparāts ir piemērots tikai personīgai lietošanai, nevis medicīniskiem vai komerciāliem mērķiem. Ierīci atļauts izmantot tikai paredzētajā lietošanas mērķim un lietošanas instrukcijā norādītajā veidā. Jebkāda veida nepareiza lietošana var būt bīstama. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas rodas neatbilstošas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā. Nelietojiet dzīlo audu masāžas ierīci, ja uz jums attiecas viens vai vairāki no turpmāk minētajiem brīdinājumiem un drošības norādījumiem. Ja neesat pārliecināts, vai dzīlo audu masāžas aparāts ir piemērots tieši jums, konsultējieties ar ārstu.

4. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

	BĪSTAMI
Norāda uz tūlītējām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.	
	BRĪDINĀJUMS
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.	
	UZMANĪBU
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, var rasties nelieli vai viegli ievainojumi.	
PIEZĪME	
Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja tā netiek novērsta, var tikt bojāta sistēma vai kāda tās tuvumā esoša ierīce.	
	Izlasiet instrukcijas
	Informācija par produktu Svarīga informācija
	CE marķējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.
	Tikai lietošanai iekštelpās.
	Ražotājs

	Nelietojiet dziļo audu masāžas aparātu cilvēkiem ar implantētām elektriskajām ierīcēm (piemēram, elektrokardiostimulatoru).
	Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Neizmetiet baterijas, kas satur bīstamas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem.
 	Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.
	Atbilstības novērtējuma marķējums Apvienotajai Karalistei
	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla saīsinājums, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons
	Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEIA
	Līdzstrāvas strāvas savienojuma polaritāte
	Līdzstrāva Ierīce ir piemērota lietošanai tikai ar līdzstrāvu
	Importētāja simbols

5. IERĪCES APRAKSTS

5.1 Dziļo audu masāžas aparāts

Saistītzieņēmumi ir parādīti 3. lappusē.

1 Piederumi Pieejami 3 dažādi piederumi
2 Piederumu savienojums
3 Rokturis
4 Baterijas uzlādes indikators (1 LED) <u>Darības laikā</u> LED deg baltā krāsā = akumulatora uzlādes līmenis 25–100% LED mirgo sarkanā krāsā = akumulatora uzlādes līmenis 0-25% <u>Uzlādes laikā:</u> LED mirgo baltā krāsā = baterijas uzlāde LED deg baltā krāsā = baterija ir pilnībā uzlādēta
5 ON/OFF poga
6 Intensitātes indikators (5 LED) 5 gaismas diodes, sākot no kreisās uz labo pusi
7 USB-C kabeļa savienojums
8 USB-C kabelis

5.2 Piederumi


6.1 Sākotnējā lietošana/ Baterijas uzlāde



Masāžai vienmēr jābūt patīkamai. Procedūru sāciet ar zemāko intensitātes līmeni un pēc tam, ja nepieciešams, palieliniet to atbilstoši savām vajadzībām. Var rasties neliela hematoma - tas ir pozitīvs terapeitisks efekts, jo ierīces lietošana var selektīvi veicināt asins plūsmu. Izolētos gadījumos uz ādas var parādīties arī apsārtuma zonas. Ja rodas pārmērīgs ādas kairinājums, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Atkarībā no sasprindzinājuma pakāpes, ieteicamais masāžas laiks ir aptuveni 10 minūtes katrā zonā (kakls, pleci, mugura, rokas, sēžamvieta vai kājas).

Pirms pirmās dziļās audu masāžas aparāta lietošanas vispirms uzlādējiet to vismaz 3 stundas. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet no ierīces visu iepakojuma materiālu.
2. Savienojiet pievienoto USB-C kabeli ar dziļo audu masāžas ierīci.

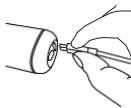

USB-C kabeļa savienojums [6] atrodas zem Intensitātes indikatora [6] (5 LED). 3. Savienojiet USB-C vadu ar elektrotīkla spraudni (nav iekļauts komplektācijā). Iespraudiet spraudni piemērotā kontaktligzdā. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators [4] parāda pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni.

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators [4] mirgo baltā krāsā = akumulatora uzlāde
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators [4] deg baltā krāsā = akumulators uzlādēts

6. LIETOŠANA

9 Sfēriskais uzgalis Vislabāk piemērots lielu laukumu un lielu muskuļu grupu (piemēram, augšdelma vai apakšstilba) apstrādei.
10 Spirālveida uzgalis Vspiemērotākais dziļo muskuļu audu masāžai un mērķtiecīgai ķermeņa punktu masāžai (piemēram, pēdām).
11 U-veida uzgalis Vislabāk piemērots dziļo muskuļu audu apstrādei muguras lejasdaļā (izņemot mugurkaulu) vai Ahileja cīpslu masāžai.

4. Tiklīdz akumulatora uzlādes līmeņa indikators [4] iedegas baltā krāsā, atvienojiet USB-C spraudni (nav iekļauts komplektācijā) no kontaktlīdždas. Akumulators ir pilnībā uzlādēts. Pēc pilnīgas uzlādes, akumulatora darbības laiks ir aptuveni 4 stundas. Tiklīdz akumulatora uzlādes līmeņa indikators [4] sāk mirgot sarkanā krāsā, uzlādējiet dziļo audu masāžas ierīci, pretējā gadījumā tā automātiski izslēgsies.

6.2. Piederuma izvēle/maiņa

Izvēlieties vēlamopiederumu pirms masāžas uzsākšanas. Lai nomainītu piederumu, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet piederumu no dziļo audu masāžas ierīces, pavelkot to horizontālā virzienā.
2. Uzbīdīet vēlamo piederumu uz dziļo audu masāžas ierīces līdz tas droši noklikšķ vietā.

6.3. Ierīces ieslēgšanas/ intensitātes līmeņa izvēle



Dziļo audu masāžas ierīcei ir automātiskās izslēgšanās funkcija. Tas nozīmē, ka dziļo audu masāžas ierīce automātiski izslēdzas pēc aptuveni 10 minūšu ilga lietošanas perioda.

1. Nospiediet un pieturiet ON/OFF pogu [5]  2 sekundes. Iedegsies akumulatora uzlādes līmeņa indikators [4]. Ierīce ir gaidīšanas režīmā.
2. Īsi nospiediet ON/OFF pogu [5] , lai ieslēgtu ierīci. Iedegsies intensitātes indikatora [6] kreisā LED. Masāža sākas ar 1. intensitātes līmeni.

3. Lai pārslēgtos starp intensitātes līmeņiem, īsi nospiediet ON/OFF pogu  [5]. Intensitātes indikators [6] parāda pašreizējo intensitātes līmeni.

1. intensitātes līmenis (1800 apgr./min / 30 Hz)
→
2. intensitātes līmenis (2100 apgr./min / 35 Hz)
→
3. intensitātes līmenis (2400 apgr./min / 40 Hz)
→
4. intensitātes līmenis (2700 apgr./min / 45 Hz)
→
5. intensitātes līmenis (3000 apgr./min / 50 Hz)
→

Gaidīšanas režīms.

4. Jūs varat izslēgt ierīci jebkurā brīdī lietošanas laikā, nospiežot un pieturot ON/OFF pogu [5]  (2 sekundes). Ja vēlreiz nospiežat ON/OFF pogu [5] , augstākajā intensitātes līmenī, ierīce izslēgsies. Ierīce pāries gaidīšanas režīmā.



Ja ierīce apstājas lietošanas laikā, tas var būt saistīts ar pārmērīgu spiedienu. Pārliecinieties, ka neizmantojat dziļo audu masāžas ierīci ar pārāk lielu spiedienu.

7. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr izslēdziet ierīci pirms tīrīšanas.
- Nemazgājiet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.
- Notīriet ierīci ar viegli mitru drānu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Lai nodrošinātu higiēnu, notīriet piederumus [9]/[10]/[11] ar ūdeni un saudzīgu tīrīšanas līdzekli.
- Tīriet ierīci, izmantojot vienīgi norādītās metodes. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, ka ierīcē iekļūst šķidrums.
- Izmantojot masāžas eļļas (ieteicams tikai, izmantojot [10]/[11] piederumu),

pārliecinieties, ka tie noņemti visi atlikumi un piederums ir tīrs.

- Neizmantojiet ierīci vai piederumus, kamēr visas sastāvdaļas nav pilnīgi sausas.

Kopšana

Ja neplānojat lietot ierīci ilgāku laiku, iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā vidē, nodrošinot, ka tā nav apkrauta ar papildu priekšmetiem.


8. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?

Problēma	Dziļo ausu masāžas aparāts lietošanas laikā apstājas.
Risinājums	Lietojot dziļo ausu masāžas aparātu, pārliecinieties, ka uz to netiek izdarīts pārāk liels spiediens. Ja spiediens būs pārāk liels, ierīce uz īsu brīdi apstāsies.

9. UTILIZĀCIJA

Bateriju iznīcināšana

Izmetot ierīci, vispirms no tās jāizņem akumulators. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

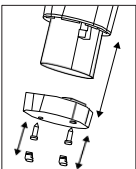1. Ar smailu priekšmetu (piemēram, skrūvgriezi) noņemiet gumijas vāciņus no roktura apakšējās daļas .

2. Atskrūvējiet skrūvi roktura apakšā.
3. Noņemiet vāku, kas atrodas roktura apakšpusē.
4. Tagad izvelciet akumulatoru no roktura, līdz ir redzams akumulatora spraudņa savienojums ar ierīci.

Tiklīdz redzat spraudņa savienojumu, atvienojiet to no ierīces.

5. Pēc tam vāciņu var atkal piesprīdināt ierīces apakšējai daļai, izmantojot skrūvi savienojumu roktura apakšējā galā.

Tukšas, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāiznīcina, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētas savākšanas kastes, otrreizējās pārstrādes punktus vai elektronikas mazumtirgotājus. Likumdošanā ir noteikts, ka baterijas ir jāiznīcina.

Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svini

Cd = baterija satur kadmiju

Hg = baterija satur dzīvsudrabu



Bojātas vai izlīdētas baterijas ir jāpārstrādā saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EK un tās grozījumiem. Nododiet baterijas un/vai ierīci atbilstošās atkritumu savākšanas vietās.

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes vietā

jūsu valstī. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm.



10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ekspluatācijas, pieslēdzot pie elektrotīkla lēeja	5.0 V  2.0 A
Izmēri	Apt. 12.7 x 5.1 x cm 15,3 cm (bez piederumiem)
Svars	Aptuveni 431 g (bez piederumiem, bez USB-C kabeļa)
Baterija: Jauda Nominālais spriegums Tipa apzīmējums	2000 mAh 7.4 V Litija jonu

11. GARANTĪJA / APKOPE

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki poik 6, Tallina 12918