

beurer

**HK 145 Cosy
Weight Green
Planet**




**Soojendus padi
Kasutusjuhend**




**STANDARD
100**
Special Articles
24.HDE.72388
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



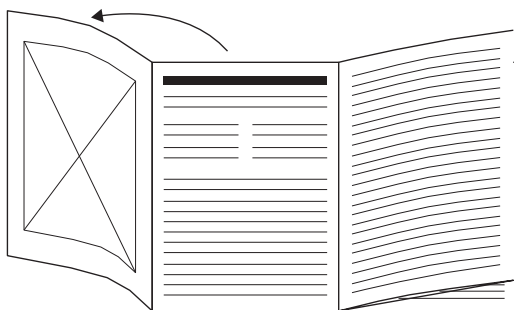

EE Enne kasutusjuhendi lugemist voltige lahti lehekülg 3.

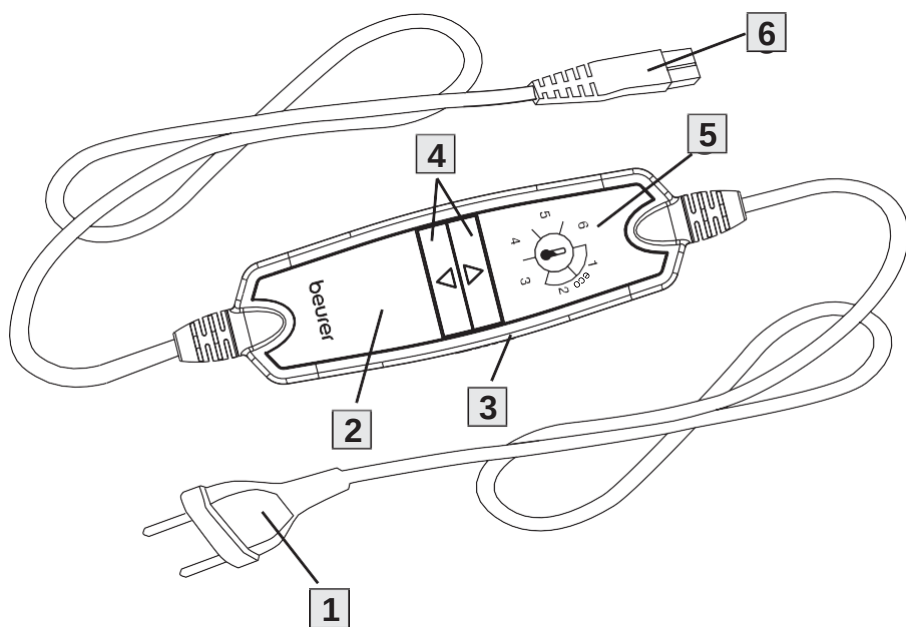

 **Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Seadme edasiandmisel kellelegi teisele andke kaasa ka see kasutusjuhend.**

SISUKORD

1. Seadme komplekti kuuluvad esemed	4
2. Märgid ja sümbolid	4
3. Olulised juhised Hoidke need alles	5
4. Kasutusotstarve	6
5. Seadme kirjeldus	7
6. Seadme kasutamine	7
6.1 Ohutus	7
6.2 Enne esmast kasutamist	7
6.3 Sisselülitamine	7

Temperatuuri seadistamine	7
6.4 Automaatne väljalülitus	7
6.5 Väljalülitamine	7
7. Puhastamine ja hooldustööd	7
8. Mida teha probleemide tekkimisel?	7
9. Hoiustamine	7
10. Kasutuselt kõrvaldamine	7
11. Tehnilised andmed	7
12. Garantii / teenindus	7

1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluse korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiате kasutusjuhendist). Enne esimest kasutuskorda eemaldage rippuv silt teabega Beureri Green Planeti kohta.



- Soojenduspadi
- Juhtpult
- Kasutusjuhend

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

	⚠ OHT!
Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla surm või raske vigastus.	
	⚠ HOIATUS!
Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.	
	⚠ TÄHELEPANU!
Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.	
	⚠ MÄRKUS
Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.	
	Teoteteave Tähtis teave.
	Lugege kasutusjuhiseid.

	Elektroonilist seadet ei tohi visata olmeprügi hulka
	Tootja
	CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele.
	Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali kood, B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp
	Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Kaitseklass II
	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Mitte kasutada alla 3-aastastel lastel.
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus
	Importija
	Pesta temperatuuril kuni 30 °C Väga õrn pesu
	Mitte valgendada
	Mitte puhastada keemiliselt.
	Mitte torgata sisse nõelu!
	Mitte triikida
	Mitte kasutada trummelkuivatust.

	Ärge kasutage seadet kokkupanduna ega rullituna!
	GRS – sertifitseerimisstandard ringlussevõetud sisuga toodetele
	Selles seadmes kasutatud tekstiilid vastavad 24.KD3.72388
	Hohensteini teadusinstituudi kinnitatud standardi Oeko Tex Standard 100 ökoloogilistele nõuetele.
	Nutitelefoni link taustateabele Beureri Green Planeti toodete ja kehtlikkuse kohta

3. OLULISED JUHISED HOIDKE NEED ALLES

⚠ HOIATUS!

- Alltoodud märkuste eiramine võib tuua kaasa isikuvigastuse või varalise kahju (elektrilöök, põletushaavad nahal, tulekahju). Järgnev ohutusteave ei ole mõeldud mitte ainult inimeste kaitsmiseks, vaid ka toote kahjustamise vältimiseks. Seetõttu pöörake neile ohutusmärkustele erilist tähelepanu ja kui annate toote kellelegi teisele, andke kaasa ka see kasutusjuhend.
- Seda soojenduspatja ei tohi kasutada isikud, kes ei tunnetata kuumust või kaitsetud isikud, kes ei saa liigsele kuumusele reageerida (nt diabeetikud, haigusest tulenevate nahamuutustega või seadme kasutuskohas armkoega isikud või isikud, kes on valuvaigistite või alkoholi mõju all).
- Mitte kasutada imikutel ega väikelastel (0-3-aastastel lastel), sest nemad ei suuda liigsele kuumusele reageerida.
- 3-8-aastastel lastel tohib seadet kasutada järelevalve all.

Sel juhul seadistage juhtseade alati miinimumtemperatuurini.

- Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või

kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad toodet kasutada järelevalve all ja juhul, kui nende ohutuse eest vastutava isik on neid juhendanud patja kasutama ning nad mõistavad täielikult selle kasutamisega kaasnevaid ohtusid.

- Ärge lubage lastel tootega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- See soojenduspatja ei ole mõeldud kasutamiseks haiglates.
- Seade on mõeldud kasutamiseks üksnes kodus ja eraviisiliselt, mitte ärilistel eesmärkidel.
- Mitte torgata sisse nõelu.
- Mitte kasutada kokkupanduna ega rullituna.
- Mitte kasutada märjana.
- Soojenduspatja tohib kasutada ainult koos selle etiketil toodud juhtseadmega.
- Toiteadapteri tohib ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mille pinget vastab seadme andmeplaadil märgitud pingele.
- Kui soojenduspatja on kasutatud juba mitu tundi, soovitame temperatuuri madalamaks reguleerida. Nii ei ole ohtu, et soojendatav kehaosa üle kuumeneks, mis võib põhjustada nahapõletuse.
- Soojenduspatja väljastab elektri- ja magnetvälju, mis võivad häirida südamestimulaatori tööd. Need jäävad siiski alla lubatud piirväärtustele: elektrivälja tugevus: maksimaalselt 5000 V/m, magnetvälja tugevus: maksimaalselt 80 A/m, magnetvoolutihedus: maksimaalselt 0,1 milliteslat. Südamestimulaatori kasutajad peavad enne selle soojenduspatja kasutamist konsulteerima oma arstiga või soojenduspatja tootjaga.

- Juhtmeid ei tohi tõmmata, väänata ega järsult murda.
- Kui toitejuhe ja seade ei ole õigesti paigaldatud, võib toitejuhe minna sõlme, selle otsa võidakse komistada, seade võib kukkuda ümber või keegi võib astuda juhtme ja puldi peale. Kasutaja peab paigaldama toitejuhtme ohutult.
- Kontrollige soojenduspatja regulaarselt kulumise ja kahjustuste suhtes. Kulunud või kahjustada saanud kohtade avastamisel või juhul, kui seadet on kasutatud valesti või kui seade enam ei soojene, tuleb see enne uuesti kasutamist viia kontrollimiseks tootja kätte.
- Kui seade saab kahjustada ja sellest tulevad välja klaashelmed, siis ei tohi seadet enam kasutada. Klaashelmeid ei tohi suhu panna. Nende alla neelamise korral võtke viivitamatult ühendust arstiga.
- Ärge võtke seadet (sh tarvikud) koost lahti ega üritage neid ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Käesoleva eeskirja eiramine muudab seadme garantii kehtetuks.
- Kui soojenduspadja toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Ärge paigaldage juhtseadet ega juhtmeid otsese päikesevalguse kätte.
- Ajal, kui soojenduspadi on sisse lülitatud:
 - Ärge asetage seadme peale teravaid esemeid
 - Ärge asetage seadme peale kuuma vee pudeleid, soojenduspatju vms. Soojenduspadja kasutamise ajal lähevad juhtseadme elektroonilised komponendid soojaks. Seetõttu ei

tohi juhtseadet kasutamise ajaks kunagi kinni katta ega soojenduspadja peale asetada.

- Enne hoiulepanekut laske soojenduspadjal alati jahtuda. Vastasel juhul võib soojenduspadi kahjustada saada.
- Teravate murdejoonte vältimiseks ärge asetage soojenduspadja peale mingeid esemeid. Vastasel juhul võib soojenduspadi kahjustada saada.
- Järgige alljärgnevates peatükkides toodud juhiseid: Seadme kasutamine, Puhastamine ja hooldustööd, Hoiustamine.
- Küsimuste tekkimisel pöörduge klienditeenindusse.

4. KASUTUSEESMÄRK

ETTEVAATUST!

See soojenduspadi on mõeldud ainult inimese keha soojendamiseks.

5. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiata lk 3.

- 1 Toitepistik
- 2 Juhtseade
- 3 Liugnupp (ON = I / OFF = 0)
- 4 Temperatuuri seadistamise nupud
- 4 Temperatuuriseadistuste ekraan (valgustusega)
- 5 Ühendusliides

6. KASUTAMINE

6.1 Ohutus

MÄRKUS

- Soojenduspadjal on OHUTUSSÜSTEEM. See sensoriga tehnoloogia aitab ennetada padja ülekuumenemist, lülitades selle rikke tekkimisel automaatselt välja. Kui OHUTUSSÜSTEEM on soojenduspadja välja lülitanud, ei hakka selle temperatuuriseadistused soojenduspadja sisselülitamisel enam põlema.
- Palun pidage meeles, et pärast rikke esinemist ei tohi soojenduspatja ohutuse tagamiseks enam kasutada ja see tuleb saata teeninduskeskusesse, kus toode parandatakse.

- Ärge ühendage katkist soojenduspatja teise sama tüüpi juhtseadmega. See aktiveerib püsiva väljalülituse juhtseadme ohutussüsteemi kaudu.

6.2 Esmakordne kasutamine

Soojenduspadi ei tohi kasutamise ajal olla kortsus ega kokkuvolditud.


1. Ühendage juhtseade soojenduspadja ühendusliidesesse.
2. Ühendage seadme toitepistik seinapistikupespa.

6.3 Sisselülitamine

Vajutage juhtseadme paremal küljel asuv liugnupp **3** asendisse "I" (ON) – vt juhtseadme pilti. Kui nupp on lülitatud sisse, siis temperatuuriseadistuste ekraan põleb.



Soojenduspadja täidise ühtlaseks jaotamiseks raputage patja õrnalt.

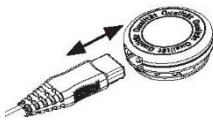

6.4 Temperatuuri seadistamine

Temperatuuri suurendamiseks vajutage  nuppu **4**.

Temperatuuri vähendamiseks vajutage  nuppu **4**.

Tase 1: minimaalne Tase 2-5: individuaalne temperatuur tase 6: maksimaalne temperatuur

Kõige kiirem viis soojenduspadja soojendamiseks on lülitada see alguses kõige kõrgemale temperatuurile.

Seda tüüpi soojenduspatjadel on kiirsoojenimisfunktsioon, mille kasutamisel soojendatakse padi esimese 10 minuti jooksul üles.

6.5 Automaatne väljalülitus

Soojenduspadjal on automaatne väljalülitusfunktsioon.

Soojenduspadil lülitub automaatselt välja, kui seda on järjest kasutatud 90 minutit. Kuvatud temperatuuriseadistuste osa juhtpuldil hakkab vilkuma. Soojenduspadja uuesti sisse lülitamiseks seadistage küljel asuv liugnupp **3** esmalt asendisse "0" (OFF). Umbes 5 sekundi pärast saab seadme uuesti sisse lülitada.

⚠ HOIATUS!

Kui soojenduspatja on kasutatud juba mitu tundi, soovime temperatuuri madalamaks reguleerida. Nii ei ole ohtu, et soojendatav kehaosa üle kuumeneks, mis võib põhjustada nahapõletuse.



6.6 Väljalülitamine

Soojenduspadja välja lülitamiseks seadistage juhtseadme küljel asuv liugnupp **3** asendisse "0" (OFF). Temperatuuriekraan kustub.



Kui soojenduspatja ei kasutata, lülitage liugnupp **3** asendisse ON/OFF seadistusele "0" (OFF) ja tõmmake toitepistik seinapistikupesast välja. Ühendage juhtseade soojenduspadja küljest lahti, eemaldades ühendusliidese.

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

⚠ HOIATUS!

Enne puhastamist tõmmake alati kõigepealt pistik pistikupesast välja. Ühendage juhtseade soojenduspadja küljest lahti, eemaldades ühendusliidese. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi oht.

Juhtseade ei tohi kunagi puutuda kokku vee ega muu vedelikuga, sest need võivad juhtseadet kahjustada.

- Puhastage juhtseadet kuiva, ebamevaba lapiga. Ärge kasutage kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Seadet saab puhastada niiske lapi ja pesukäsnaga, millele on vajadusel lisatud veidi leebetoimelist puhastusvahendit.
- Pidage meeles, et soojenduspatja võivad ei tohi keemiliselt puhastada, väänata, trummelkuivatada,

rullida ega triikida. Vastasel juhul võib soojenduspadi kahjustada saada.

- Soojenduspadi on masinpestav.
- Kasutage eriti õrnatoimelist pesutsükli temperatuuril 30°C (mõeldud villaste esemete pesemiseks). Kasutage õrnatoimelist vedelpesuvahendit ja doseerige see vastavalt tootja juhistele.
- Seadme liiga sage pesemine avaldab sellele negatiivset mõju. Seetõttu ei tohiks seda kogu kasutusaja jooksul pesta rohkem kui 10 korda.
- Laotage soojenduspadi kohe pärast pesu veel niiskena pesukuivatusraami peale kuivama.
- Ärge kinnitage seadet pesukuivatusraami külge pesulõksude ega muu sarnasega. Vastasel juhul võib soojenduspadi kahjustada saada.
- Juhtme ja lüliti tohib uuesti ühendada alles siis, kui pistik ja padi on täielikult ära kuivanud. Vastasel juhul võib soojenduspadi kahjustada saada.

⚠ HOIATUS!

Ärge kunagi lülitage soojenduspatja sisse, et seda kuivatada. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi oht.

8. MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?

Probleem	Temperatuuriseadistused ei põle, kuigi - juhtseade on nõuetekohaselt soojenduspadja külge ühendatud, - toitepistik on ühendatud töökorras pistikupespa, - juhtpuldil küljel asuv liugnupp on seadistatud asendisse „I“ (sees);
Põhjus	Ohutussüsteem on soojenduspadja püsivalt välja lülitatud.
Lahendus	Saatke soojenduspadja ja juhtseade klienditeenindusse.

9. HOIUSTAMINE

Kui te ei kavatse soojenduspatja pikemat aega kasutada, soovime selle panna originaalpakendisse tagasi. Ühendage juhtseade soojenduspadja küljest lahti, lahutades pistikühenduse.

10. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivi (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

11. TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

Vt soojenduspadja nimiandmete plaadilt.

12. GARANTII / TEENINDUS

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasaolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa •
www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com • [\[healthguide.com\]\(http://healthguide.com\)](http://www.beurer-</p></div><div data-bbox=)



Importija Ühendkuningriigis: BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Stonecross Lane
North, WA3 2SH, Lowton, United Kingdom

